



MGMove



**El mejor reloj inteligente con capacidades
integradas para protección de vida**
Con tecnología 4G LTE

Detalles del producto

A **Botón de ayuda SOS (rojo)**

Mantén presionado durante 5 segundos para realizar una llamada de emergencia. Una pulsación rápida también puede llevarte de vuelta a la pantalla anterior.

B **Botón de suspensión/activación(negro)**

Mantén presionado durante 20 segundos para reiniciar el sistema si es necesario. Cuando el dispositivo se quede sin batería y se coloque en la base de carga, es necesario presionar este botón durante 20 segundos para encenderlo.

C **Correa ajustable**

La hebilla de metal y la correa de goma trabajan juntas para proporcionar un ajuste perfecto. Debes desabrochar la correa para cargar tu dispositivo.

Luz de indicación de señal

D En la pantalla del reloj, un punto indicará la intensidad de la señal: la luz verde significa buena señal, la amarilla, señal variable (de buena a baja), y la roja quiere decir que no hay señal.

E **Luz de estado de la batería**

Al colocar el reloj en la base de carga, la luz indicará el estado de la carga: la verde significa carga completa, la amarilla que no está cargando (ajusta la base) y la roja que la carga esta por debajo del 97%.

¿Qué hay en la caja?



MGMove



Base de
Carga



Adaptador de
corriente y
cable USB

Funciones principales

Tu dispositivo está lleno de funciones útiles que puedes acceder con un simple deslizamiento de tu dedo. Para acceder a tus aplicaciones, toca la pantalla del reloj.



La llamada se está realizando.



Llamada en curso.

Realizar una llamada de emergencia SOS

La aplicación SOS es una de las dos formas de activar el dispositivo para solicitar ayuda a nuestro centro de monitoreo. Toca el ícono SOS en la pantalla o mantén presionado el botón físico SOS (rojo) en el lateral del reloj durante 5 segundos, asegúrate de mantener presionado durante toda la cuenta regresiva. Si la activación fue accidental, puedes cancelarla dentro de esos 5 segundos.





**Prueba
en curso**



**Contador
de pasos**



**Vista
semanal**

Prueba del dispositivo

Es recomendable probar el dispositivo al menos una vez al mes. La aplicación de prueba permite verificar su funcionamiento sin enviar una alerta real a un agente. El dispositivo indicará si la prueba se completó con éxito.

Contador de pasos

La aplicación de pasos registra la cantidad de pasos diarios y semanales. Para ver tu progreso semanal, selecciona "Semana" y desplázate hacia abajo. Para establecer una meta, ve a la configuración dentro de la aplicación de pasos y usa los botones + o -. La opción de reinicio se puede usar para restablecer tu objetivo a 0. Una vez que el objetivo haya sido ajustado, presiona el botón (rojo) de retroceso, para volver a la pantalla principal.



Clima



Opciones de caratula



Apagando

Clima

La aplicación del clima mostrará las condiciones actuales según la ubicación del dispositivo.

Configuración


Aquí puedes cambiar el estilo de la carátula de tu reloj o actualizar tu preferencia de "sacudir para activar". Para cambiar la carátula de tu reloj, toca la opción "carátula de reloj". Desliza para ver la carátula que prefieras y tócala. El toque guardará tu selección. Toca el botón SOS para regresar. La opción de "sacudir para activar" está desactivada. Activar "sacudir para activar" puede disminuir la duración de la batería.

Apagado del dispositivo

Para apagar el dispositivo, usa la aplicación de apagado. Para volver a encenderlo, mantén presionado el botón negro durante 5 segundos o colócalo en la base de carga.

Intensidad de señal y porcentaje de batería

La intensidad de la señal se muestra en la pantalla del reloj como un punto de color: verde (buena señal), amarillo (de buena a baja señal) o rojo (sin señal).

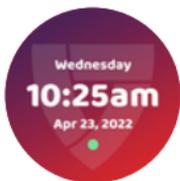

La pantalla desplegable muestra el porcentaje de batería, la intensidad de la señal, el conteo diario de pasos y el clima actual. Para verla, desliza el pulgar desde la parte superior de la pantalla del reloj hasta la parte inferior. La duración estimada de la batería es de 24 horas.



Cosas importantes que debes saber

- La pantalla del reloj funciona como tu pantalla de inicio.
- Desliza hacia abajo desde la pantalla del reloj para mostrar el menú desplegable
- Toca la pantalla para acceder a tus aplicaciones. Desliza hacia la izquierda para navegar a la segunda página de aplicaciones.
- Mientras usas una aplicación, desliza hacia la derecha o presiona el botón rojo de SOS para regresar al menú principal.
- Los mensajes y recordatorios no están disponibles actualmente con tu programa.

MVM020000 – Rev. 1

Si necesitas asistencia adicional, nuestro equipo de Atención al Cliente puede ser contactado al **1 (800) 645-2060**.

De Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. ET, Sábado y Domingo: 9:00 a.m. – 8:00 p.m. ET para soporte técnico.